

IEA Medical Kühlhandschuhe

Anwendung:

- Cold Therapy (Kältetherapie):
 - Die Handschuhe für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank oder Kühlschrank legen.
 - Empfohlene Anwendung: 2–4 Stunden insgesamt, jeweils in kurzen Intervallen von 15–20 Minuten.
 - Nach Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Warm Therapy (Wärmetherapie):
 - In der Mikrowelle bei 600 Watt für 30–40 Sekunden erwärmen.
 - Zwischendurch prüfen, um Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.
 - Vor dem Anziehen kurz abkühlen lassen, falls zu heiß.

Warnhinweise:

- Nicht länger als empfohlen anwenden (max. 20-Minuten-Intervalle).
- Nicht bei offenen Wunden, Entzündungen oder Hautreizungen verwenden.
- Vor jeder Anwendung auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten prüfen.
- Überhitzung vermeiden, Handschuhe beim Erwärmen beobachten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei unangenehmen Hautreaktionen die Anwendung sofort abbrechen.

Kontakt-Hersteller:

Jiangxi Handasen Industry Co., Ltd.

Ganzhou, Jiangxi, China

 iris@handasen.com

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLHANDSCHUH

COOLING GLOVE · GANT DE REFROIDISSEMENT
GUANTO REFRIGERANTE · GUANTE REFRIGERANTE



 x1

Verpackungsinhalt : 1 Handschuh
Package contents : 1 glove
Contenu de l'emballage : 1 gant
Contenuto della confezione : 1 guanto
Contenido del paquete : 1 guante

MODEL:
HCN7003

WE TAKE CARE
OF YOU

WE TAKE CARE
OF YOU,
ALWAYS!

WE TAKE CARE
OF YOU,
ALWAYS!



KÜHLHANDSCHUH

COOLING GLOVE · GANT DE REFRÉDISATION
GUANTO REFRIGERANTE · GUANTE REFRIGERANTE



DE : Einfach zu verwenden
EN : Easy to use
FR : Facile à utiliser
IT : Facile da usare
ES : Fácil de usar



DE : Wiederverwendbar
EN : Reusable
FR : Réutilisable
IT : Riutilizzabile
ES : Reutilizable



DE : Verwendung als Kalt-Therapie
EN : Use as cold therapy
FR : Utilisation en thérapie froide
IT : Utilizzare come terapia del freddo
ES : Uso como terapia de frío




DE : Hoher Komfort
EN : High comfort
FR : Grand confort
IT : Elevato comfort
ES : Gran comodidad



DE : Verwendung als Warm-Therapie
EN : Use as warm therapy
FR : Utilisation comme thérapie chaude
IT : Utilizzare come terapia a caldo
ES : Utilizar como terapia caliente



DE : Universelle Passform
EN : Universal fit
FR : Ajustement universel
IT : Misura universale
ES : Ajuste universal

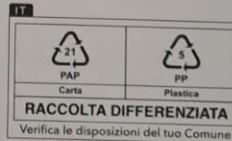

IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com

REF HCN7003

LOT 1B290625

MD

2028-6-28



Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55, 1D,
Madrid 28039 Spain.



Jiangxi Handasen Industry Co., Ltd.
Shaxi Avenue, Zhennan New District,
Shaxi Town, Xinzhou District,
Shangrao City, Jiangxi, China
Mail: info@handasen.com



(01)00977082221125
(11)250629
(17)290628
(10)1B290625



4 260764 171446

2025May_IEA_Polaybag_4both



WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!

IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61
81667 München, Germany
Web: www.iea-medical.com
Mail: info@iea-medical.com

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLHANDSCHUH

COOLING GLOVE - GANT DE REFROIDISSEMENT
GUANTO REFRIGERANTE - GUANTE REFRIGERANTE



 x1

Verpackungsinhalt: 1 Handschuh
Package contents: 1 glove
Contenuto da l'emballage: 1 guante
Contenuto della confezione: 1 guante
Contenido del paquete: 1 guante

MODEL:
HCN7003

WE TAKE CARE

IEA Medical Kühlmanschette

Anwendung:

- Cold Therapy (Kältetherapie):
 - Die Manschette für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank oder Kühlschrank legen.
 - Empfohlene Anwendung: 2–4 Stunden insgesamt, jeweils in kurzen Intervallen von 15–20 Minuten.
 - Nach Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Warm Therapy (Wärmetherapie):
 - In der Mikrowelle bei 600 Watt für 30–40 Sekunden erwärmen.
 - Zwischendurch prüfen, um Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.
 - Vor dem Anlegen kurz abkühlen lassen, falls zu heiß.

Warnhinweise:

- Nicht länger als empfohlen anwenden (max. 20-Minuten-Intervalle).
- Nicht bei offenen Wunden, Entzündungen oder Hautreizungen verwenden.
- Vor jeder Anwendung auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten prüfen.
- Überhitzung vermeiden, Manschette beim Erwärmen beobachten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei unangenehmen Hautreaktionen die Anwendung sofort abbrechen.

Kontakt-Hersteller:

Jiangxi Handasen Industry Co., Ltd.

Ganzhou, Jiangxi, China

 iris@handasen.com

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE · MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE · MANGA DE ENFRIAMIENTO

GRÖÖE/SIZE
TAILLE/DIMENSIONE/TALLA

XL

MODEL:
HCN001XL



WE TAKE CARE

OF YOU.
ALWAYS!

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE · MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE · MANGA DE ENFRIAMIENTO



DE: Unterstützt die Regeneration
EN: Supports regeneration
FR: Soutient la régénération
IT: Sostiene la rigenerazione
ES: Favorece la regeneración



DE: Einfach zu verwenden
EN: Easy to use
FR: Facile à utiliser
IT: Facile da usare
ES: Fácil de usar



DE: Kann Schwellungen reduzieren
EN: Can reduce swelling
FR: Peut réduire les gonflements
IT: Può ridurre il gonfiore
ES: Puede reducir la hinchazón



DE: Verwendung als Kalt-Therapie
EN: Use as cold therapy
FR: Utilisation en thérapie froide
IT: Utilizzare come terapia del freddo
ES: Uso como terapia de frío





DE: Wiederverwendbar
EN: Reusable
FR: Réutilisable
IT: Riutilizzabile
ES: Reutilizable



DE: Vielseitig Anwendbar (Knöchel, Knie, Ellenbogen, Arm)
EN: Versatile application (ankle, knee, elbow, arm)
FR: Polyvalent (cheville, genou, coude, bras)
IT: Applicazione versatile (caviglia, ginocchio, gomito, braccio)
ES: Aplicación versátil (tobillo, rodilla, codo, brazo)



DE: Verwendung als Warm-Therapie
EN: Use as warm therapy
FR: Utilisation comme thérapie chaude
IT: Utilizzare come terapia a caldo
ES: Utilizar como terapia caliente

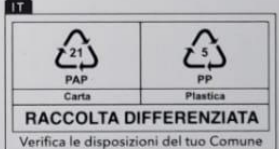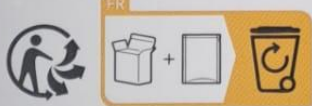

IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com

Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55, 1D,
Madrid 28039 Spain.

Jiangxi Handasen Industry Co., Ltd.
Shaxi Avenue, Zhennan New District,
Shaxi Town, Xinzhou District,
Shangrao City, Jiangxi, China
Mail: info@handasen.com

REF HCN001M
LOT 1B290625
MD



(01)06977082221095
(11)250629
(17)280628
(10)1B290625

2028-6-28



4 260764 171415

ALWAYS!

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE · MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE · MANGA DE ENFRIAMIENTO



DE: Unterstützt die Regeneration
EN: Supports regeneration
FR: Soutient la régénération
IT: Sostiene la rigenerazione
ES: Favorece la regeneración



DE: Verwendung als Kalt-Therapie
EN: Use as cold therapy
FR: Utilisation en thérapie froide
IT: Utilizzare come terapia del freddo
ES: Uso como terapia de frío



DE: Verwendung als Warm-Therapie
EN: Use as warm therapy
FR: Utilisation comme thérapie chaude
IT: Utilizzare come terapia a caldo
ES: Utilizar como terapia caliente



DE: Einfach zu verwenden
EN: Easy to use
FR: Facile à utiliser
IT: Facile da usare
ES: Fácil de usar




DE: Wiederverwendbar
EN: Reusable
FR: Réutilisable
IT: Riutilizzabile
ES: Reutilizable



DE: Kann Schwellungen reduzieren
EN: Can reduce swelling
FR: Peut réduire les gonflements
IT: Può ridurre il gonfiore
ES: Puede reducir la hinchazón



DE: Vielseitig Anwendbar (Knöchel, Knie, Ellenbogen, Arm)
EN: Versatile application (ankle, knee, elbow, arm)
FR: Polyvalent (cheville, genou, coude, bras)
IT: Applicazione versatile (caviglia, ginocchio, gomito, braccio)
ES: Aplicación versátil (tobillo, rodilla, codo, brazo)

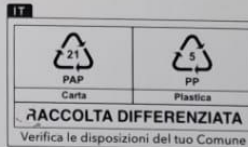

IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com



Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55, 1D,
Madrid 28039 Spain.



Jiangxi Handasen Industry Co., Ltd.
Shaxi Avenue, Zhennan New District,
Shaxi Town, Xinzhou District,
Shangrao City, Jiangxi, China
Mail: info@handasen.com

REF HCN001XL
LOT 1B290625
MD

2028-6-28



(01)06977082221116
(11)250629
(17)280628
(10)1B290625



4 260764 171439

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE · MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE · MANGA DE ENFRIAMIENTO

GRÖÖE/SIZE
TAILLE/DIMENSIONE/TALLA

L

MODEL:
HCN001L



WE TAKE CARE
OF YOU

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE · MANCHETTE DE REFRROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE · MANGA DE ENFRIAMIENTO

GRÖÖE/SIZE
TAILLE/DIMENSIONE/TALLA

M

MODEL:
HCN001M



WE TAKE CARE
OF YOU

OF YOU.
ALWAYS!

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE · MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE · MANGA DE ENFRIAMIENTO



DE: Unterstützt die Regeneration
EN: Supports regeneration
FR: Soutient la régénération
IT: Sostiene la rigenerazione
ES: Favorece la regeneración



DE: Verwendung als Kalt-Therapie
EN: Use as cold therapy
FR: Utilisation en thérapie froide
IT: Utilizzare come terapia del freddo
ES: Uso como terapia de frío



DE: Verwendung als Warm-Therapie
EN: Use as warm therapy
FR: Utilisation comme thérapie chaude
IT: Utilizzare come terapia calda
ES: Utilizar como terapia caliente



DE: Einfach zu verwenden
EN: Easy to use
FR: Facile à utiliser
IT: Facile da usare
ES: Fácil de usar




DE: Wiederverwendbar
EN: Reusable
FR: Réutilisable
IT: Riutilizzabile
ES: Reutilizable



DE: Kann Schwellungen reduzieren
EN: Can reduce swelling
FR: Peut réduire les gonflements
IT: Può ridurre il gonfiore
ES: Puede reducir la hinchazón



DE: Vielseitig Anwendbar (Knöchel, Knie, Ellenbogen, Arm)
EN: Versatile application (ankle, knee, elbow, arm)
FR: Polyvalent (cheville, genou, coude, bras)
IT: Applicazione versatile (caviglia, ginocchio, gomito, braccio)
ES: Aplicación versátil (tobillo, rodilla, codo, brazo)

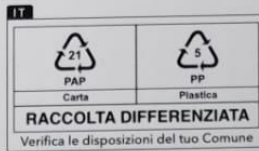

IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com



Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55, 1D,
Madrid 28039 Spain.



Jiangxi Handasen Industry Co., Ltd.
Shaxi Avenue, Zhennan New District,
Shaxi Town, Xinzhou District,
Shangrao City, Jiangxi, China
Mail: info@handasen.com

REF HCN001L

LOT 1B290625

MD



(01)06977082221101
(11)250629
(17)280628
(10)1B290625



2028-6-28



4 260764 171422

OF YOU ALWAYS!

WE TAKE CARE OF YOU. ALWAYS!

IEA MEDICAL

KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE - MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE - MANGA DE ENFRIAMIENTO

- 01. Anwendung der Lagerung
- 02. Lagerung
- 03. Lagerung
- 04. Lagerung
- 05. Lagerung
- 06. Lagerung
- 07. Lagerung
- 08. Lagerung
- 09. Lagerung
- 10. Lagerung
- 11. Lagerung
- 12. Lagerung
- 13. Lagerung
- 14. Lagerung
- 15. Lagerung
- 16. Lagerung
- 17. Lagerung
- 18. Lagerung
- 19. Lagerung
- 20. Lagerung
- 21. Lagerung
- 22. Lagerung
- 23. Lagerung
- 24. Lagerung
- 25. Lagerung
- 26. Lagerung
- 27. Lagerung
- 28. Lagerung
- 29. Lagerung
- 30. Lagerung
- 31. Lagerung
- 32. Lagerung
- 33. Lagerung
- 34. Lagerung
- 35. Lagerung
- 36. Lagerung
- 37. Lagerung
- 38. Lagerung
- 39. Lagerung
- 40. Lagerung
- 41. Lagerung
- 42. Lagerung
- 43. Lagerung
- 44. Lagerung
- 45. Lagerung
- 46. Lagerung
- 47. Lagerung
- 48. Lagerung
- 49. Lagerung
- 50. Lagerung

M

RECICLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

IEA International Trading GmbH
Gartenstr. 20/21
81547 München, Deutschland
Mail: www.iea-medical.com
Mail: www.iea-medical.com

Remania S.L.
Calle de Almansa 51, 10,
Madrid 28017 Spain

Jiangxi Handaan Industry Co., Ltd.
Shan Avenue, Zhongxin New District,
Shao Shan, Kinshui District,
Shangqiu City, Jiangxi, China
Mail: info@handaan.com

REF: HCN001M
LOT: 1B290625
MD

2028-4-28

CE

4 250764 171415

OF YOU ALWAYS!

WE TAKE CARE OF YOU. ALWAYS!

IEA MEDICAL

KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE - MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE - MANGA DE ENFRIAMIENTO

- 01. Anwendung der Lagerung
- 02. Lagerung
- 03. Lagerung
- 04. Lagerung
- 05. Lagerung
- 06. Lagerung
- 07. Lagerung
- 08. Lagerung
- 09. Lagerung
- 10. Lagerung
- 11. Lagerung
- 12. Lagerung
- 13. Lagerung
- 14. Lagerung
- 15. Lagerung
- 16. Lagerung
- 17. Lagerung
- 18. Lagerung
- 19. Lagerung
- 20. Lagerung
- 21. Lagerung
- 22. Lagerung
- 23. Lagerung
- 24. Lagerung
- 25. Lagerung
- 26. Lagerung
- 27. Lagerung
- 28. Lagerung
- 29. Lagerung
- 30. Lagerung
- 31. Lagerung
- 32. Lagerung
- 33. Lagerung
- 34. Lagerung
- 35. Lagerung
- 36. Lagerung
- 37. Lagerung
- 38. Lagerung
- 39. Lagerung
- 40. Lagerung
- 41. Lagerung
- 42. Lagerung
- 43. Lagerung
- 44. Lagerung
- 45. Lagerung
- 46. Lagerung
- 47. Lagerung
- 48. Lagerung
- 49. Lagerung
- 50. Lagerung

L

RECICLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

IEA International Trading GmbH
Gartenstr. 20/21
81547 München, Deutschland
Mail: www.iea-medical.com
Mail: www.iea-medical.com

Remania S.L.
Calle de Almansa 51, 10,
Madrid 28017 Spain

Jiangxi Handaan Industry Co., Ltd.
Shan Avenue, Zhongxin New District,
Shao Shan, Kinshui District,
Shangqiu City, Jiangxi, China
Mail: info@handaan.com

REF: HCN001L
LOT: 1B290625
MD

2028-4-28

CE

4 250764 171422

OF YOU ALWAYS!

WE TAKE CARE OF YOU. ALWAYS!

IEA MEDICAL

KÜHLMANSCHETTE

COOLING SLEEVE - MANCHETTE DE REFROIDISSEMENT
FASCIA REFRIGERANTE - MANGA DE ENFRIAMIENTO

- 01. Anwendung der Lagerung
- 02. Lagerung
- 03. Lagerung
- 04. Lagerung
- 05. Lagerung
- 06. Lagerung
- 07. Lagerung
- 08. Lagerung
- 09. Lagerung
- 10. Lagerung
- 11. Lagerung
- 12. Lagerung
- 13. Lagerung
- 14. Lagerung
- 15. Lagerung
- 16. Lagerung
- 17. Lagerung
- 18. Lagerung
- 19. Lagerung
- 20. Lagerung
- 21. Lagerung
- 22. Lagerung
- 23. Lagerung
- 24. Lagerung
- 25. Lagerung
- 26. Lagerung
- 27. Lagerung
- 28. Lagerung
- 29. Lagerung
- 30. Lagerung
- 31. Lagerung
- 32. Lagerung
- 33. Lagerung
- 34. Lagerung
- 35. Lagerung
- 36. Lagerung
- 37. Lagerung
- 38. Lagerung
- 39. Lagerung
- 40. Lagerung
- 41. Lagerung
- 42. Lagerung
- 43. Lagerung
- 44. Lagerung
- 45. Lagerung
- 46. Lagerung
- 47. Lagerung
- 48. Lagerung
- 49. Lagerung
- 50. Lagerung

RACCOLTA DIFFERENZIATA

IEA International Trading GmbH
Gartenstr. 20/21
81547 München, Deutschland
Mail: www.iea-medical.com
Mail: www.iea-medical.com

Remania S.L.
Calle de Almansa 51, 10,
Madrid 28017 Spain

Jiangxi Handaan Industry Co., Ltd.
Shan Avenue, Zhongxin New District,
Shao Shan, Kinshui District,
Shangqiu City, Jiangxi, China
Mail: info@handaan.com

REF: HCN001XL
LOT: 1B290625
MD

2028-4-28

CE

4 250764 171422

